



Operatiestoelen

DOC Neo & George Surgeon Chair

novymed.com

*Mobilizing
Healthcare* ☺

DOC Neo.

Klaar voor elke ingreep.

Maximale controle in de OK, minimale belasting voor de zorgprofessional in oogheeskunde.

Maak kennis met de DOC Neo: een innovatieve stoel die zorgt voor meer efficiëntie, comfort én veiligheid tijdens elke ingreep. Ontworpen met oog voor detail, gebouwd voor dagelijks gebruik. Ideaal te combineren met de George Surgeon Chair.

Slim. Sterk. Betrouwbaar.
Dat is NovyMed.

Toekomstbestendige bedieningselementen met de mogelijkheid om het aantal geheugenposities uit te breiden en voorzien van een reanimatiefunctie.

250 KG
veilige
werklast

Dankzij de **opklapbare armleuningen** kan de patiënt zich in noodgevallen vrij zijwaarts bewegen.

Groter verstelbereik in de hoogte, met een laagste stand van 54 cm tot een maximale hoogte van 81 cm.

DIN-rails op rug- en zitgedeelte en optioneel op het beendeel.



Standaard lithiumbatterij (LFP)
Acht keer een langere levensduur dan loodzuurbatterijen en milieuvriendelijker.

Een volledig opnieuw ontworpen **rijmechanisme** voor verbeterde en ongeëvenaarde wendbaarheid!

De stoel is vervaardigd uit kant-en-klare onderdelen die gemakkelijk verkrijgbaar zijn; deze kunnen tijdens onderhoud en reparaties eenvoudig worden gecontroleerd en indien nodig efficiënt worden vervangen.



DOC Neo: the next generation in surgical mobility

De DOC Neo is de doorontwikkeling van de beproefde DOC Classic. Bekend om z'n degelijkheid, geliefd om z'n eenvoud. Maar met de Neo gaan we een stap verder. Of eigenlijk: meerdere. Van manoeuvreerbaarheid en batterijduur tot bediening en design: de DOC Neo is op elk vlak slimmer, stiller en stabiel.

Een moderne stoel voor moderne OK's.



Vijfde wiel



Draperingssteun



Toekomstbestendige besturing



Duwgrepen in ergonomische positie



Voetbedieningen



Mechanische ontgrendeling op het wiel



Diverse hoofdsteunen



Keuzeschakelaar voor max. 24 geheugenposities



Opklapbare armsteunen



Lendensteun



Extra DIN-rails op het voetgedeelte



Ontworpen met het oog op onderhoudsgemak

Bedieningsgemak voorop

Zorgprofessionals willen betrouwbaarheid en intuïtieve bediening. Precies dat biedt de DOC Neo.

- Duidelijke handbediening met display én voetpedalen
- Makkelijk programmeerbare posities
- Optionele selector switch voor meerdere gebruikers of ingrepen
- Stille, nauwkeurige motoren voor maximale controle

Met een lithium-ijzerfosfaat batterij die 8x langer meegaat dan traditionele accu's, is de DOC Neo altijd klaar voor gebruik.

Veiligheid tot in de details


Elke functie is ontworpen met de veiligheid van patiënt én professional in gedachten:

- Elektronische én handmatige noodontgrendeling
- Opklapbare armsteunen voor zijdelingse toegang
- Vergrendelbare wielen tijdens transfer en ingreep
- Volledig hygiënische en afneembare bekleding
- Elektronisch vergrendelbare bediening (lockfunctie) tijdens operatie

De DOC Neo is CE-gecertificeerd en voldoet aan de strengste normen.



De mogelijkheid om de stoel in een volledig horizontale stand te zetten.

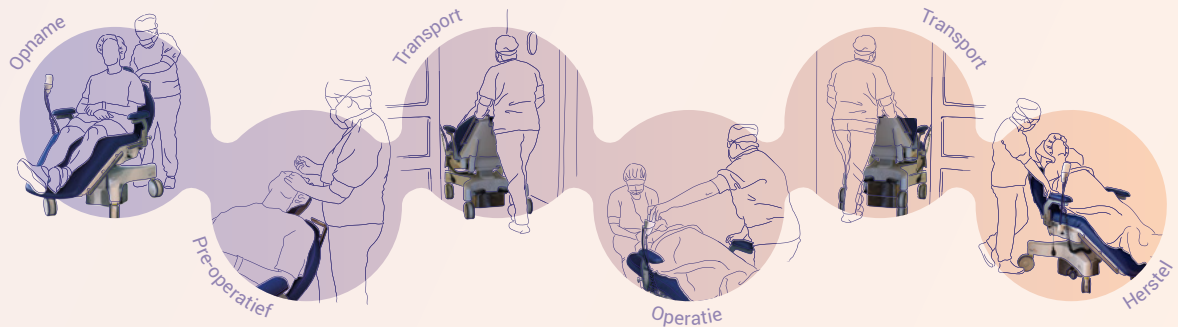

Bewezen concept. Volledig doorontwikkeld.

De DOC Neo is ontworpen voor het volledige dagbehandeltraject: van intake en transport tot operatie en recovery.

De patiënt blijft in dezelfde stoel, het hele proces. Dat bespaart tijd, voorkomt patiëntverplaatsingen en vergroot de efficiëntie.

- Elektrisch verstelbare rug, beensteun, kanteling én hoogte
- Trendelenburg- én CPR-positie
- 5 geheugenstanden, inclusief entry/exit-positie
- Elektrische rem en vijfde wiel voor ongeëvenaarde wendbaarheid
- SWL van 250 kg

Waar de DOC Classic z'n sporen verdiende, laat de DOC Neo zien wat toekomstbestendige innovatie is.

George Surgeon Chair: comfort meets control



Als aanvulling op de DOC Neo biedt NovyMed ook de George Surgeon Chair: een operatiestoel voor chirurgen die langdurig moeten presteren.

Met elektrisch verstelbare hoogte, rem en voetbediening, 3D-verstelbare armleuningen en uiterst stabiele wielen biedt George maximale ondersteuning, zonder afleiding.

- Elektrische hoog/laag én remfunctie (voet én handbediening)
- Water- en stofdichte precisiewielen met noodontgrendeling
- Hoog ergonomisch zitcomfort, ook bij lange ingrepen
- Stabiele werkhouding met minimale inspanning

Samen vormen de DOC Neo en George een sterk duo in elke moderne OK.



Technische specificaties

Werkhoogte*	40 - 65 cm	Slaglengte hoog/laag-functie	250 mm
Hoekverstelling rugleuning	75 - 120°	Hoogteverstelling armleuningen	320 mm
Maximale dynamische belasting	180 kg / 400 lbs	Lengteverstelling armleuningen	200 mm
Diameter wieltjes	125 mm	Breedteverstelling armleuningen	30 - 50 cm

*gemeten vanaf de vloer tot de bovenkant van de zitting

De DOC Neo

voldoet aan de MDR-voorschriften en aan de strengste normen

Uniek in zijn klasse


Waar vergelijkbare stoelen vooral focussen op comfort, combineert de DOC Neo comfort met maximale mobiliteit, eenvoudig onderhoud en een lange levensduur. En het design? Dat is strak, ergonomisch en herkenbaar. Dutch Design in de zorg, zoals het bedoeld is.

Accessoires en opties

- Draperingssteun
- Polssteun
- Infuuspaal met kogelgewrichtsklem voor DIN-rail
- Extra DIN-rails op de beensteun
- Opklapbare duwgrepen voor de beensteun, met DIN-raiklem
- Keuzeschakelaar om het aantal geheugenposities uit te breiden tot 6 x 4 posities
- Beschermhoes voor beensteun
- Verschillende vormen hoofddeun op aanvraag (bijvoorbeeld plat in plaats van cupvorm)

Technische specificaties

Max. draagvermogen - dynamisch (A)	250 kg
Wielbasis	80 (I) x 55 (H) / 60 (J) cm
Hoogte DOC Neo Pro	54 - 81 cm (excl. bekleding)
Maximale breedte (K)	75 cm
Breedte patiëntenzitting (L)	50,8 cm
Zitting	60 x 42 cm
Voetensteun	60 x 65 cm
Rugleuning	60 x 60 cm
Hoofddeun	14 x 20 cm
ArMLEUNINGEN	6,5 x 32 cm
Wielen	ø 15 x 7 cm
Aantal geheugenposities	4 (max. 24 mogelijk)
Voeding	25,6 V / 10 Ah
Remsysteem	Elektromechanisch
Instelbare wioldruk	In rijstand
Toekomstbestendige bediening	CPR-functie en vergrendelknop
Totale lengte van de bekleding in horizontale stand, inclusief hoofddeun: 203 cm (F), verschuifbare hoofddeun max. 20 cm (D).	

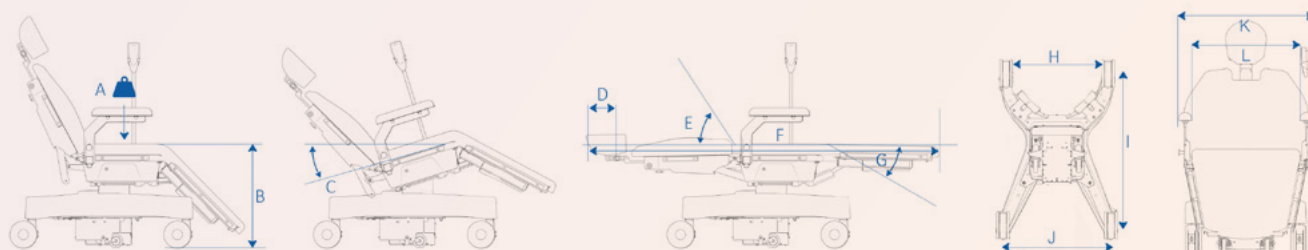

Over NovyMed

NovyMed ontwikkelt en levert slimme mobiliteitsoplossingen voor de medische wereld. Wij combineren technisch vernuft met praktisch inzicht, altijd in nauwe samenwerking met zorgprofessionals. Zo maken we producten die niet alleen vandaag werken, maar ook klaar zijn voor morgen. Betrouwbaar, gebruiksvriendelijk en ontworpen om zorgprocessen écht te verbeteren.